

#whdentalwerk



video.wh.com

Ahora en su
distribuidor o
en wh.com



Clase B, su inversión más rentable



lina

Lo esencial de la esterilización

Fácil y ampliable.


Lina es un miembro de la línea de esterilizadores de W&H que ofrece un nivel máximo de seguridad y una excelente relación precio-rendimiento gracias a sus ciclos de clase B y al registro automático de los ciclos en una memoria USB.

Ventajas

- › Con el ciclo ECO B se reduce el tiempo de ciclo hasta la mitad
- › Funcionamiento silencioso gracias al sistema de separación de agua patentado
- › Teclado de fácil manejo para una navegación sencilla en todas las opciones de esterilización
- › Filtro antipolvo integrado para la protección de los componentes internos
- › Inicio de ciclo programable
- › Excelente relación calidad-precio
- › Kit conexión de agua (opción)
- › Grabación digital automática de los ciclos en una memoria USB (opción)



lina

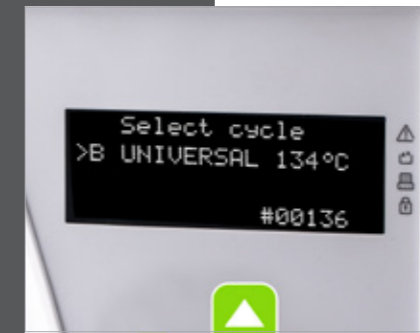

Exclusivamente ciclos clase B

El esterilizador Lina trabaja exclusivamente con ciclos de clase B y para pequeñas cantidades de carga con ciclos cortos ECO B.



Navegación sencilla

Con su teclado de fácil manejo se garantiza una navegación sencilla en todas las opciones de esterilización.



Programa de esterilización ECO B

El tiempo de ciclo puede reducirse a la mitad para pequeñas cantidades de carga.



Registrador de datos integrado

La existencia de un registrador de datos integrado significa que los ciclos de esterilización pueden guardarse en un lápiz de memoria USB sin necesidad de utilizar cables o equipos externos.



Impresora de etiquetas de código de barras

La impresora de etiquetas LisaSafe puede conectarse al esterilizador para imprimir códigos de barras. Combinada con el registrador de datos integrado, el sistema de trazabilidad experimenta una mejora considerable.

Datos técnicos

Ciclos de esterilización de Lina

		B-Universal 134			B-Prion 134			B-Universal 121
Temperatura		134 °C			134 °C			121 °C
Duración de la fase de esterilización		3,5'			18'			15'
Duración total del ciclo incluyendo secado completo		ECO-B	Carga Máx.	Carga típica	ECO-B	Carga Máx.	Carga típica	Carga Máx.
	Lina 17	29'	54'	49'	44'	69'	64'	75'
	Lina 22	33'	64'	55'	48'	79'	70'	79'
Máx. carga ECO/máx. carga sólida/carga típica/máx. carga porosa		Lina 17: 0,5 kg / 4 kg / 2 kg / 1,5 kg Lina 22: 0,5 kg / 5 kg / 2 kg / 1,8 kg						
Ciclos de test		Helix/Bowie Dick/Test de Vacío						

CE CE
0051 0497

Tipos:	Lina 17 PRO13-003-17	Lina 22 PRO13-003-22
Tamaño de cámara:	17 l	22 l
Suministro eléctrico:	200 – 240 Vac 50 / 60 Hz; 10 A	
Consumo de energía:	2 kW	
Medidas externas (ancho x alto x fondo):	450 x 435 x 599 mm	
Depósito de agua residual/potable:	39 kg	40 kg
Epósito de agua residual/potable:	4 / 3,5 litros	
Área de trabajo:	5 a 10 ciclos	
Espacio útil de la cámara (ancho x alto x fondo):	195 x 195 x 297 mm	195 x 195 x 390 mm
Possibilidades de conexión:	1 conexión serie, 1 USB + 1 conexiones serie (opción), válvula integrada para el suministro automático de agua (opción)	

Los esterilizadores Lina han sido diseñados, certificados y validados siguiendo las Directivas y Normativas más estrictas:

93/42/EEC	Directiva médica sanitaria
2014/68/EU	Directiva de Equipos a Presión
EN ISO 17665-1	Validación y control de rutina
EN 13060	Esterilizadores de vapor de agua pequeños
EN 61326	Compatibilidad electromagnética
EN 61010-1	Requisitos de seguridad
EN 61010-2-040	Requisitos específicos para esterilizadores de vapor

Fabricante:

W&H Sterilization Srl.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), Italy
t +39 035-66 63 000
f +39 035-50 96 988
office.sterilization@wh.com
wh.com

Distribución:

W&H Ibérica
C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valencia, España
t +34 96 353 20 20
f +34 96 353 25 79
oficinas.es@wh.com
wh.com

Fotografías orientativas. Los accesorios y complementos adicionales mostrados, no se incluyen en el contenido suministrado.

20409 ASP Rev. 005 / 31.01.2019
Salvo modificaciones